


BALTON[®]

www.balton.pl

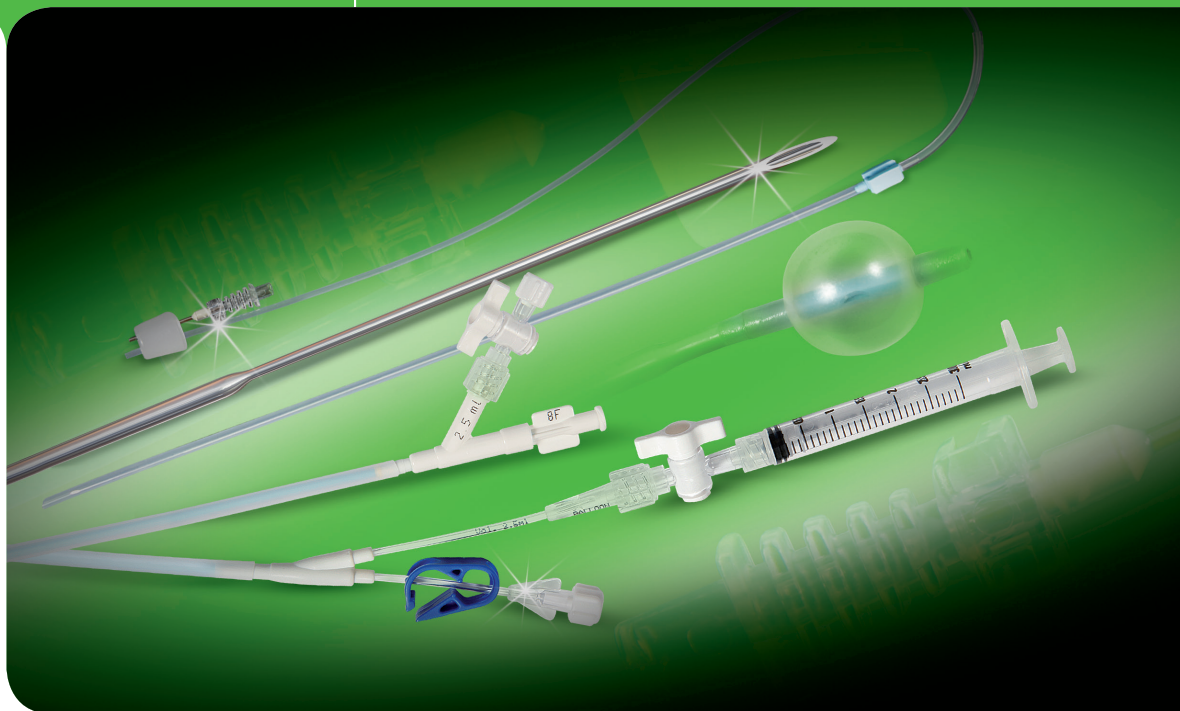

Гинекология

ГИНЕКОЛОГИЯ

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ

Катетеры HSG	2
Комплекты для гистеросальпингографии	2

ВНУТРИМАТОЧНАЯ ИНСЕМИНАЦИЯ

Катетеры Фридмана	3
Катетеры Крафта	3
Комплекты для трансплантации эмбриона	4
Комплекты для забора яйцеклеток	4
Интрацервикальное приспособление для искусственного осеменения . .	5
Экстрацервикальное приспособление для искусственного осеменения .	5
Катетеры для искусственного осеменения	5
Катетеры для искусственного осеменения прямые	6

ОСТАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Внутриматочные спирали омега	7
Комплекты для трансфузии искусственной амниотической жидкости .	7
Наборы для биопсии эндометрия	8

КАТЕТЕРЫ HSG



- Катетер, видимый в рентгеновских лучах с двойным просветом
- Запорный клапан, регулирующий давление в баллоне
- Наконечник для инъекции контрастного вещества
- Шприц в наборе
- Баллон, блокирующий отток контрастного вещества во время процедуры
- Зажим в дренаже, блокирующий отток контрастного вещества во время замены шприца.
- Простое и быстрое наполнение и опорожнение баллона.

Кат. №	Катетер размер/длина	Объем заполнения жидкостью
KHSG5F	5F / 25 см	0.75 мл
KHSG5F27	5F / 27 см	0.75 мл
KHSG8F	8F / 25 см	2.5 мл
KHSG8F27	8F / 27 см	2.5 мл
KHSG12F	12F / 25 см	6.0 мл

Катетер для Гистеросальпингографии позволяет оценить форму полости матки и проходимость маточных труб с минимальным дискомфортом.

Пример номера по каталогу: KHSG5F.

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ГИСТЕРОСАЛЬПИНГОГРАФИИ



Элементы комплекта:


Катетер HSG
Направляющий катетер 4F длиной 50 см
Эпидуральный катетер 20G x 60см
Проводник: диаметр 0.035" (0,9мм), длина 80 см
Вращающийся адаптер типа «Y» с клапаном

Кат. №	Катетер размер/длина	Объем заполнения жидкостью
ZHSG12F	12F / 25 см	7 мл

Пример номера по каталогу: ZHSG12F.

КАТЕТЕРЫ ФРИДМАНА

Катетер Фридмана используется для введения промытых сперматозоидов в полость матки.

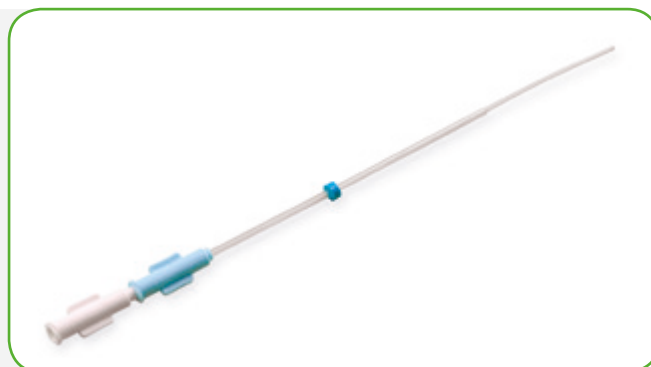

Кат. №

KF

Пример номера по каталогу: KF.

КАТЕТЕРЫ КРАФТА

Катетер Крафта используется для осеменения и трансплантации эмбриона под контролем ультразвука. Этот тип катетера позволяет ввести эмбрион в матку, имеющую нетипичное расположение (отклонение назад или в сторону). Медный проводник способствует лучшей визуализации катетера при контроле ультразвуком. Тонкий атравматичный катетер, в котором содержится эмбрион, вводится после извлечения мандрена.



Кат. №

KC

Пример номера по каталогу: KC.

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ЭМБРИОНА




Перенос эмбрионов (ET – embryo transfer) является неотъемлемым и кульминационным компонентом лечения методами экстракорпорального оплодотворения. Его главной целью является безопасное размещение эмбрионов с наивысшим потенциалом развития в полости матки.

Кат. №

ZTZ

Пример номера по каталогу: ZTZ.

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ЗАБОРА ЯЙЦЕКЛЕТОК

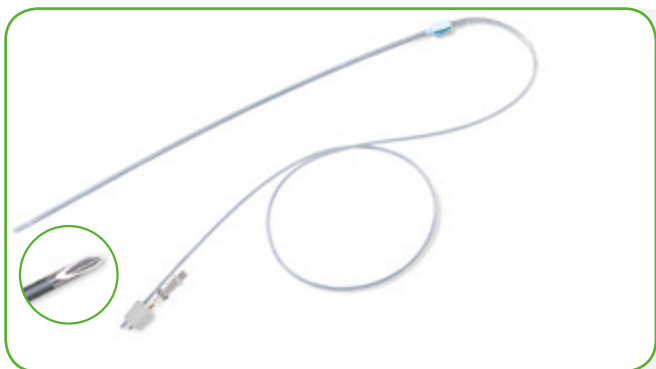

- высококачественная пункционная игла
- игла снабжена специальным наконечником, который позволяет полностью контролировать острие на ультразвуковом экране.

Кат. №

ZPKJ16G

ZPKJ17G

Комплект используется для ультразвукового контроля трансвагинальной аспирации ооцитов из фолликулов яичника (в программе экстракорпорального оплодотворения). Кончик иглы сконструирован таким образом, чтобы уменьшить травму связанную с прохождением через стенку влагалища и повреждением соседних тканей.

Пример номера по каталогу: ZPKJ17G.

ИНТРАЦЕРВИКАЛЬНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ

Кат. №

KPINW

Интрацервикальное приспособление используется для введения спермы в цервикальный канал матки.

Пример номера по каталогу: KPINW.

ЭКСТРАЦЕРВИКАЛЬНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ

Кат. №

KPINN

Экстрацервикальное приспособление используется для введения спермы в область наружного маточного зева.

Пример номера по каталогу: KPINN.

КАТЕТЕРЫ ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ

Трехсоставной катетер для искусственного осеменения, включающий направляющий катетер и тонкий внутренний катетер, используется для введения промытых сперматозоидов в полость матки. Регулируемый фиксатор позволяет оптимально разместить катетер в матке.

**Кат. №**

KI

Пример номера по каталогу: KI.

КАТЕТЕРЫ ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ ПРЯМЫЕ



Трехсоставной катетер для искусственного осеменения, включающий направляющий катетер и тонкий внутренний катетер, используется для введения промытых сперматозоидов в полость матки. Регулируемый фиксатор позволяет оптимально разместить катетер в матке.

Кат. №


KIP

Пример номера по каталогу: KIP.

ВНУТРИМАТОЧНЫЕ СПИРАЛИ ОМЕГА

Элементы комплекта:

Апplikатор
Толкатель
Вкладыш

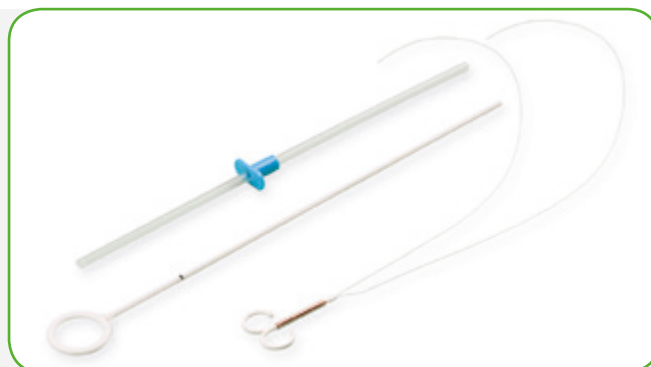

Кат. №

AOM
AOS
AOL

Размер

средний
малый
большой

Внутриматочные спирали изготовлены из безопасных для здоровья медицинских материалов (полиэтилен – видимый в рентгеновских лучах). Спираль не прерывает цикл, высокоэффективна, проста и безопасна в использовании. Этот метод контрацепции более безопасен для здоровья женщины, чем гормональные методы контрацепции. Спирали доступны в следующих размерах: малый (S), средний (M) и большой (L).

Пример номера по каталогу: AOS.

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ТРАНСФУЗИИ ИСКУССТВЕННОЙ АМНИОТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ

Элементы комплекта:

Эпидуральный катетер
Антибактериальный фильтр
Самоклеющийся фиксатор фильтра
Игла



Кат. №

ZPSP016G
ZPSP018G

Катетер размер/длина

16G / 50 см
18G / 50 см

Игла размер/длина

16G / 12 см
18G / 12 см

Комплект используется в случаях олигогидроамниоза различной этиологии. Комплект изготовлен из безопасных для здоровья медицинских материалов. Доступен в двух размерах: 16G и 18G.

Пример номера по каталогу: ZPSP016G.

НАБОРЫ ДЛЯ БИОПСИИ ЭНДОМЕТРИЯ



Набор для биопсии эндометрия используется для забора образцов эндометрия.

Кат. №

ZBE

Пример номера по каталогу: ZBE.



Производитель Медицинского Оборудования

ул. Модлинська, 294, 03-152 Варшава, Польша
тел.: /+48 22/ 597 44 00, факс: /+48 22/ 597 44 44
e-mail: balton@balton.pl; www.balton.pl